


# SleepAngel madratsid

SleepAngel madratsitel on kaks peamist funktsiooni:

- **Infektsioonileviku takistamine** - madratsi vedelikukindlal ümbrisel puuduvad õmblused ja lukud, mis hoiab ära madratsi sisu saastumise. Õhk liigub madratsist sisse ja välja läbi vedelikukindla nanoporse PneumaPure™ filtri
- **Lamatiste ennetamine** - sisud on arendatud erineva riskiastmega patsientidele, lisaks on madratsi pealiskangas neljasuunalise venivusega, vedelikukindel aga hingav, st veeauru läbilaskev

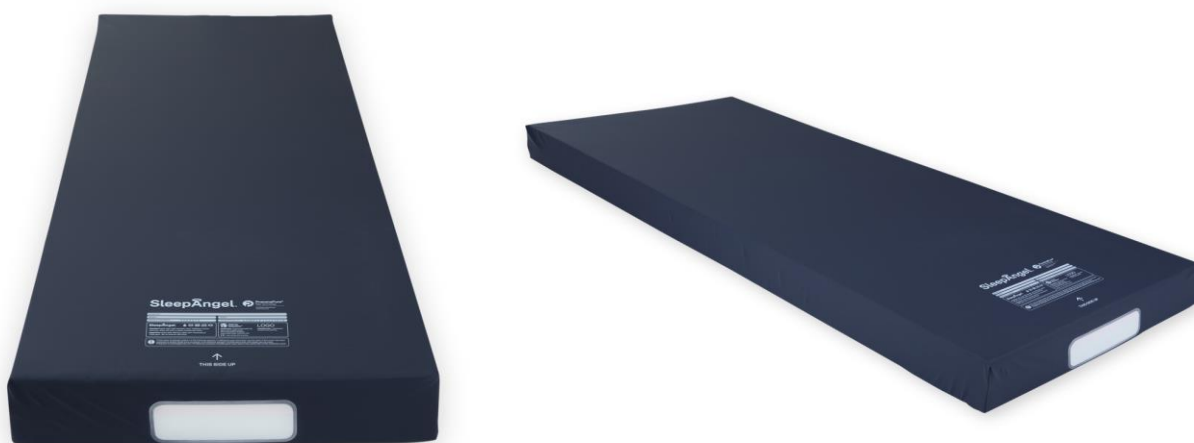

## Spetsifikatsioon


Kangas	Polüuretaaniga kaetud polüamiidkangas mustjassinine 230 g/m <sup>2</sup> ja
Põhi	Mittelibisev polüuretaan hall 210 g/m <sup>2</sup>
Markeering	Siiditrükk - valge trükk mustjassinisel kangal
Sisutäide	Klassifitseeritud nii madala, keskmise kui ka kõrge riskiastmega patsientidele (allpool spetsifikatsioonid)
Puhastamine	Korjata kokku ja eemaldada mustus, vajadusel pesta voolava vee all. Desinfitseerimine: max 72% alkohol, max 1000 ppm aktiivkloor. Peale desinfitseerimist puhastada pind puhta vee ja lapiga.
Ohutusstandard	Tulekindlus vastavalt standarditele BS EN ISO 12952-1:2010 ja BS EN ISO 12952-2:2010 ja BS 7175 lõige 5

Gabriel Scientific Eesti OÜ  
Valukoja 7/1, ÖÖD maja, Ülemiste City, 11415, Tallinn  
Tel: +372 5106509, info@sleepangel.ee  
www.sleepangel-medical.com

**SleepAngel**®

## Madala keskmise lamatiste tekkeriskiga patsiendile


Sisu:	Profileeritud, kõrge elastsusega poroloon
Tihedus:	40 kg/m <sup>3</sup>
Väsimusklass:	Väga vastupidav

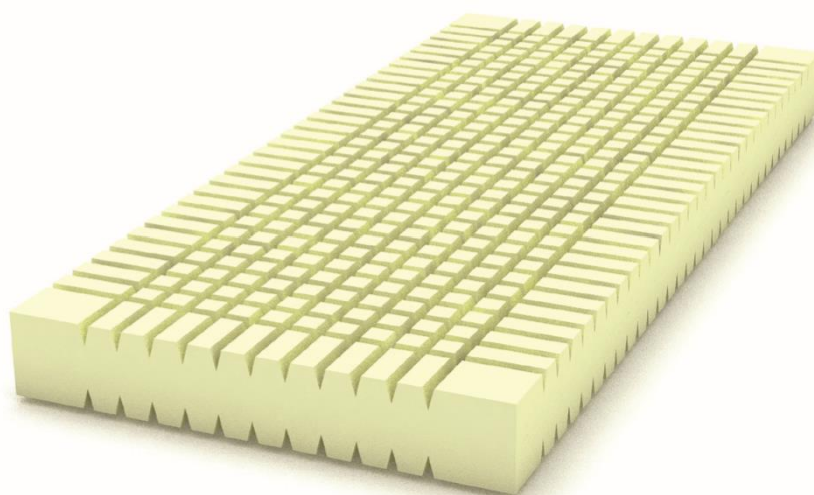

Suurus	Madratsi kaal (kg)	Pakendamine	Artikli number
80x198x15	10	1 tk kiles/ 7 tk alusel	3060009
88x198x15	11	1 tk kiles/ 5 tk alusel	3060010

## Keskmise lamatiste tekkeriskiga patsiendile


Sisu:	Pealmine pind: profileeritud, pehme mäluvaht-poroloon. Keskmine osa: pehme, kõrge elastsusega poroloon. Küljed ja põhi: tugev, kõrge elastsusega poroloon
Tihedus:	Mäluvaht-poroloon: 60 kg/m <sup>3</sup> , kõrge elastsusega poroloon: 40 kg/m <sup>3</sup>
Väsimusklass:	Väga vastupidav

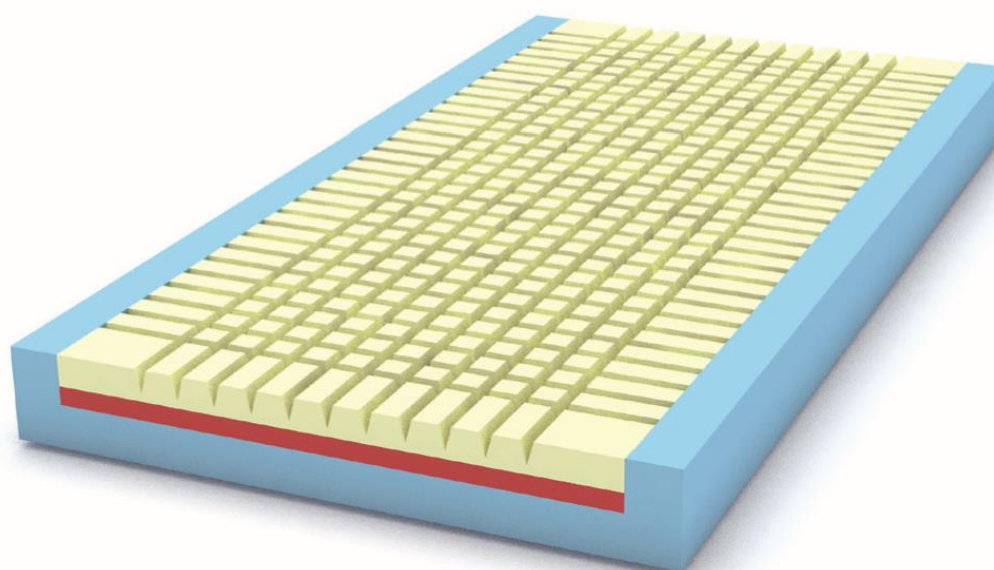

Suurus	Madratsi kaal (kg)	Pakendamine	Artikli number
78x198x15	12,0	1 tk kiles/ 7 tk alusel	3060019
80x198x15	12,5	1 tk kiles/ 7 tk alusel	3060008
88x198x15	13,5	1 tk kiles/ 5 tk alusel	3060027
90x198x15	14,0	1 tk kiles/ 5 tk alusel	3060018

## Kõrge lamatiste tekkeriskiga patsiendile

Sisu:	Pealmine pind: profileeritud pehme mäluvaht-poroloon. Kandade piirkonda on lisatud survepunktidele langevat koormust vähendav geelmatt. Keskmine osa: pehme, kõrge elastsusega poroloon. Küljed ja põhi: tugev, kõrge elastsusega poroloon.
Tihedus:	Mäluvaht-poroloon: 60 kg/m <sup>3</sup> , kõrge elastsusega poroloon: 40 kg/m <sup>3</sup>
Väsimusklass:	Väga vastupidav

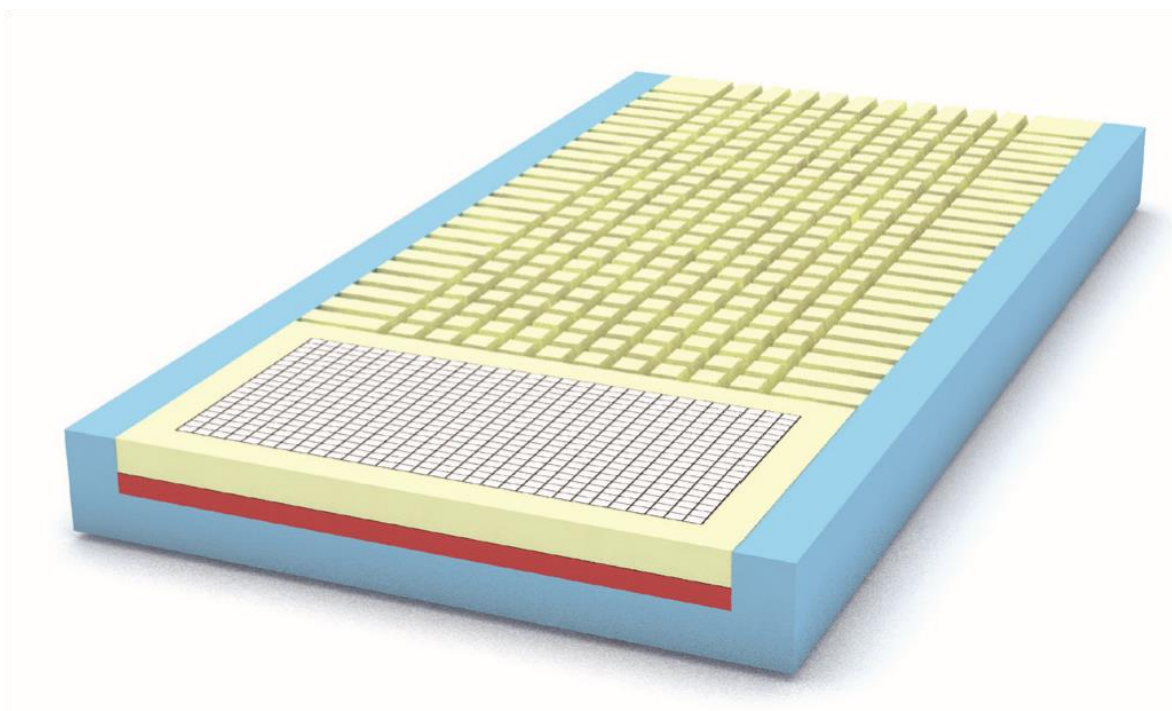

Suurus	Madratsi kaal (kg)	Pakendamine	Artikli number
80x198x15	12,0	1 tk kiles/ 7 tk alusel	3060007
88x198x15	13,5	1 tk kiles/ 5 tk alusel	3060011
90x198x15	14,0	1 tk kiles/ 5 tk alusel	3060005

### Gabriel Scientific Eesti OÜ

Valukoja 7/1, ÖÖD maja, Ülemiste City, 11415, Tallinn  
Tel: +372 5106509, info@sleepangel.ee  
www.sleepangel-medical.com

**SleepAngel.**